
ペンギンカルテ 体組成計連携マニュアル 【FiNC Smart Scale】

初期設定とご利用方法

2023/2/2 更新

<https://securekarte.com>

©2023 WiLLDo Inc.

ペンギンカルテの体組成計連携

ペンギンカルテと体組成計を連携すると、体組成計で測った測定値を手入力することなく、自動でペンギンカルテへ登録できます。

ペンギンカルテと体組成計を連携するには「ペンカルconnect」(iOS/iPadOS用アプリ)のインストールが必要です。

【動画】ペンギンカルテFiNC体組成計連携設定方法



1 はじめに

- **ペンカルconnectのダウンロードとBluetoothの設定**



QRコードから、またはAppStoreで「ペンカルconnect」を検索してダウンロードしてください。

体組成計との連携にはBluetoothを使用します。デバイスのBluetoothをONにし、ペンカルconnectがBluetoothを利用することを許可してください。

- **FiNC Smart Scale（体組成計）の準備**

体組成計での設定は不要です。

本体裏面から電池(単4電池4本)を入れて、電源が付くことを確認してください。
体組成計に乗ると電源が入り、本体ディスプレイが付きます。

※体組成計の販売はしておりません。FiNC MALLにてお買い求めください。

[メーカーオンラインショップ FiNC MALL](#)

※体組成計についての不具合、及びお問合せは恐れ入りますがメーカーへお問合せいただきますようお願いいたします。

ペンギンカルテ 管理画面での設定

連携項目の設定



FiNC Smart Scaleでの測定値をペンギンカルテのどの項目に連携するかを設定します。

①ペンギンカルテ管理画面にログインし、設定 > FiNC CS20E連携設定 をタップ

②FiNCの測定項目と連携するペンギンカルテの測定値を選択し、[保存する]をタップ

※ペンギンカルテの測定値の項目は、設定 > 測定値項目設定 から新規作成・編集・削除ができます。

※FiNC Smart Scaleの測定内容については、[FiNC Smart Scale測定項目について\(Q-0090P\)](#) をご覧ください。

アクセストークンの発行



ペンギンカルテとペンカルconnectのアプリを連携する際に必要なアクセストークンを発行します。

①設定 > アクセストークン設定 をタップ

②[新規作成]をタップし、名前を付けて保存どのデバイスが登録されているか判別しやすい名前を付けておくと管理しやすいです。

例) 施術ルーム1用タブレット
スタッフA用スマホ 等

③発行されたアクセストークンをコピー

次の手順でこのアクセストークンを利用します。

※アクセストークンを紛失した場合、紛失したトークンの名前を削除し、再度①からアクセストークンを発行してください。

ペンカルconnectの設定

サロン設定・店舗設定



① ペンカルconnectを起動

※デバイスのBluetoothはONにしてご利用ください。

② サロンIDとアクセストークンを入力し、[サロン設定登録]をタップ

- サロンID: ペンギンカルテ管理画面でログインID名の後方に表示されています
- アクセストークン: ペンギンカルテ管理画面で発行したアクセストークン

③ プルダウンから店舗を選び[店舗登録]をタップ

登録が済みましたら、右上の[閉じる]で設定画面を閉じます。

サロンワークでの ご利用方法

【ペンギンカルテ アプリ】お客様カルテの呼び出し



ペンギンカルテ アプリにログインし、ペンギンアイコンまたは検索からお客様のカルテを呼び出します。

①[+] > 測定連携をタップ
確認画面を表示します。

②「開く」をタップし、ペンカルconnectを開く
ペンカルconnectが起動されます。

お客様情報の登録




※体組成計の計測に必要なお客様情報の登録がある場合、このページは表示されずに次の手順の画面が表示されます
※

体組成計で測定するにはお客様情報の「性別・生年月日・身長」の登録が必要です。

登録や編集はペンギンカルテアプリ・管理画面と、ペンカルconnectから可能です。

【ペンカルconnect】体組成計に乗って計測

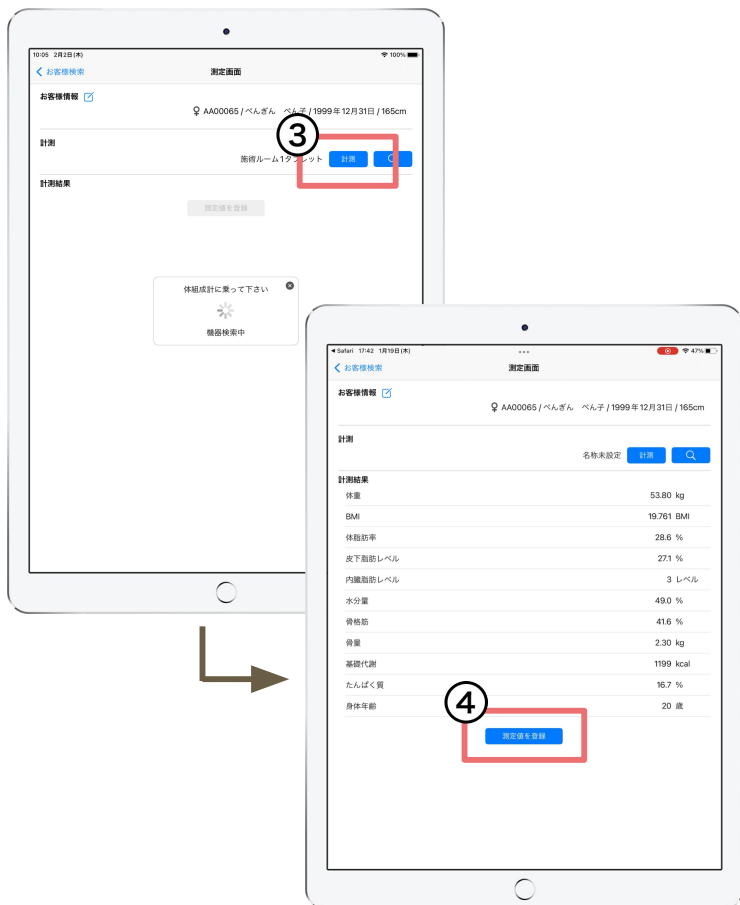

③[計測]をタップ

「体組成計に乗って下さい」と表示されたら、体組成計に乗って計測をしてください。

※正しく計測するため、素足で体組成計に乗ってください。

※体組成計から降りると、自動で電源がOFFとなります。

④[測定値を登録]をタップし、カルテに計測結果を登録

ペンギンカルテ アプリが自動で開きます。

自動で測定値がペンギンカルテに連携されます！

【ペンギンカルテ アプリ】測定結果がカルテに自動登録




カルテに測定結果が自動で登録されます。
登録された測定値は自動でグラフ化し、施
術の効果を見える化できます。



機器検索と機器の名称設定

【ペンカルconnect】体組成計が複数台ある場合

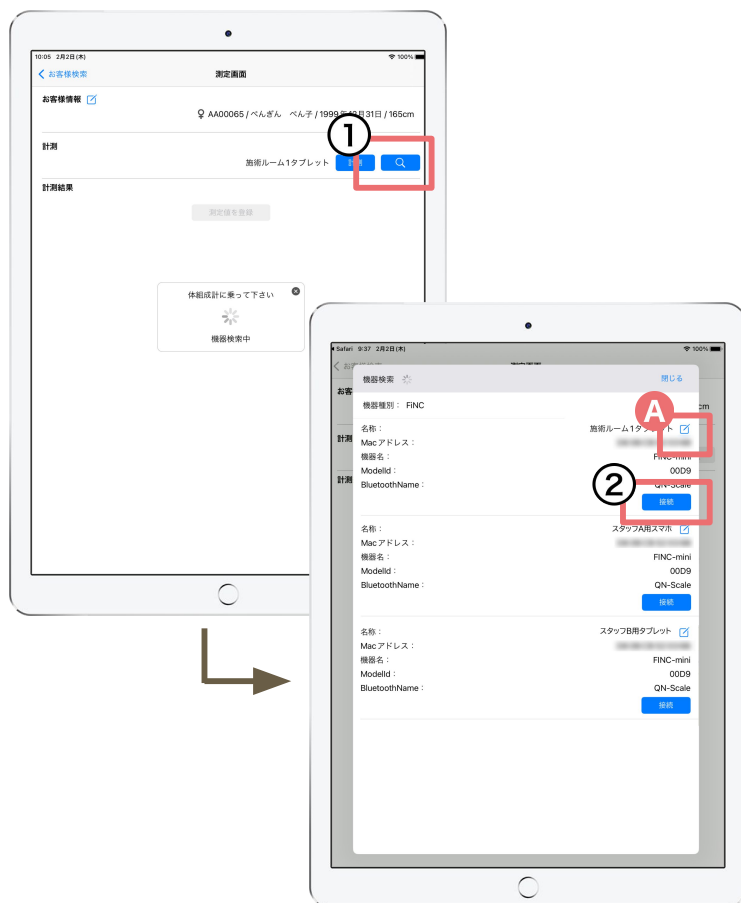

FiNC Smart Scaleが複数台ある場合などは、機器検索から使用する体組成計を選ぶことができます。

①[虫眼鏡]をタップ

②使用する体組成計の[接続]をタップ

※機器検索で何も表示されない場合は下記をご確認ください。

- ・デバイスのBluetoothがONで、ペンカルconnectがBluetoothを利用することを許可になっているか。
- ・体組成計の電源がONになっているか。体組成計に乗ると電源が入り、本体ディスプレイが付きまます。

Ⓐ機器名の設定ができます。

体組成計の設置場所などで名称を設定しておくと、体組成計を複数台設置した際にどの場所の体組成計かわかりやすくなります。

困った時は

サポートサイトをご活用いただき、ご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。

・[ペンギンカルテ公式サイト](#) 内 [サポートTOP](#)

サービスに関する最新情報(お知らせ)、よくあるご質問、マニュアル等をご案内しております。

公式サイト



・[お問合せ](#)

メール support@willdo.co.jp

お電話 フリーダイヤル 0120-36-7136

携帯電話から 0596-31-0005

お問合せ



LINE [お友達追加](#)

LINE



・[障害報告窓口](#) sos@willdo.co.jp

サービスの障害にお気づきの場合ご一報ください。
弊社で認知し次第、迅速に状況確認及び対応いたします。

